

FEUILLET TECHNIQUE

CK

Plaques CK VITROS Chemistry Products

Créatine kinase

REF 847 9396
847 8034

Application

Pour usage *in vitro* uniquement.

Les plaques CK VITROS Chemistry Products mesurent la concentration de créatine kinase (CK) contenue dans le sérum et le plasma sur les systèmes de chimie clinique VITROS 250/350/950, 5,1 FS et systèmes intégrés VITROS 5600.

Résumé et principe du dosage

La créatine kinase, également appelée créatine phosphokinase, est une enzyme cellulaire largement répandue dans les tissus. La CK est présente essentiellement dans les muscles squelettiques et le muscle cardiaque. Son rôle physiologique est lié à la formation d'ATP intervenant dans la contraction musculaire et le système de transport cellulaire. La CK sérique augmente presque toujours après un infarctus aigu du myocarde ou une lésion des muscles squelettiques. Sa concentration est également élevée en cas de myocardite, quelle qu'en soit la cause, d'accident vasculaire cérébral, de rhabdomyolyse, de polymyosite et d'effort physique violent. La CK augmente également en cas de dystrophie musculaire : dans le cas de la myopathie de Duchenne, des augmentations de taux de CK 20 à 200 fois supérieures à la normale sont fréquentes. Une diminution de la CK peut indiquer une réduction de la masse musculaire ou une atrophie musculaire. Les valeurs de référence de la CK doivent tenir compte de l'âge, du sexe et de l'activité physique du sujet. Ainsi chez les personnes âgées, les personnes alitées ou les patients atteints d'une tumeur maligne à un stade avancé, la concentration sérique de CK est faible¹.

Principe de la méthode

La méthode de dosage sur plaque CK VITROS est réalisée à l'aide des plaques CK VITROS et du jeu d'échantillons de calibrage VITROS Chemistry Products Calibrator Kit 3 sur les systèmes de chimie clinique VITROS 250/350/950 et 5,1 FS, et sur le système intégré VITROS 5600.

La plaque CK VITROS est constituée d'un support en polyester recouvert d'un film analytique multicouche.

Une goutte d'échantillon patient est déposée sur la plaque, puis répartie uniformément par la couche d'étalement dans les couches sous-jacentes. Cette dernière contient également de la *N*-acétylcystéine (NAC) servant à activer la CK sans qu'il soit nécessaire de prétraiter l'échantillon.

Lorsque l'échantillon est déposé sur la plaque, la créatine kinase catalyse la conversion de la phosphocréatine et de l'ADP en créatine et en ATP. En présence de glycérol kinase (GK), le glycérol est phosphorylé en L- α -glycérophosphate par l'ATP. L'oxydation du L- α -glycérophosphate en phospho-dihydroxyacétone et en peroxyde d'hydrogène survient en présence de L- α -glycérophosphate oxydase (α -GPO). Enfin, un leucocolorant est oxydé par le peroxyde d'hydrogène en présence de peroxydase pour former un colorant.

Les densités de réflexion sont contrôlées durant l'incubation. La vitesse de variation de la densité de réflexion est ensuite convertie en activité enzymatique.

Type de test et conditions d'exécution

Type de test	Système VITROS	Durée approximative d'incubation	Température	Longueur d'onde	Réaction Échantillon/ Volume
Dosage enzymatique cinétique en points multiples	5600, 5,1 FS, 950, 250/350	5 minutes	37 °C	670 nm	11 μ L

Les produits et systèmes ne sont pas tous disponibles dans tous les pays.


CK

Créatine kinase

FEUILLET TECHNIQUE

Avertissements et précautions

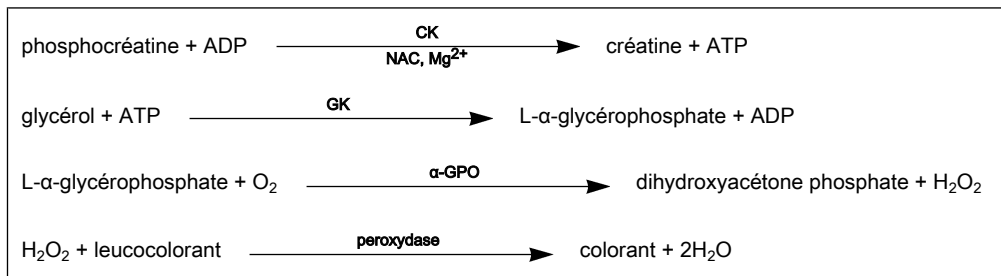Schéma de la réaction



Avertissements et précautions

Pour usage *in vitro* uniquement.

AVERTISSEMENT : *prendre les précautions d'usage lors de la manipulation de produits et d'échantillons d'origine humaine. Étant donné qu'aucune méthode de dépistage ne peut totalement garantir l'absence d'agents infectieux, considérer tous les échantillons cliniques, tous les échantillons de contrôle et de calibrage comme étant potentiellement infectieux. Manipuler les échantillons, les déchets solides et liquides, ainsi que les composants des dosages conformément à la législation locale en vigueur et à la directive M29² du CLSI ou autres directives officielles concernant le risque biologique.*

Pour prendre connaissance des avertissements et précautions d'emploi concernant les échantillons de calibrage, les échantillons de contrôle de qualité et autres composants, se reporter au feuillet technique du produit VITROS correspondant ou à la documentation produit du fabricant.

Réactifs

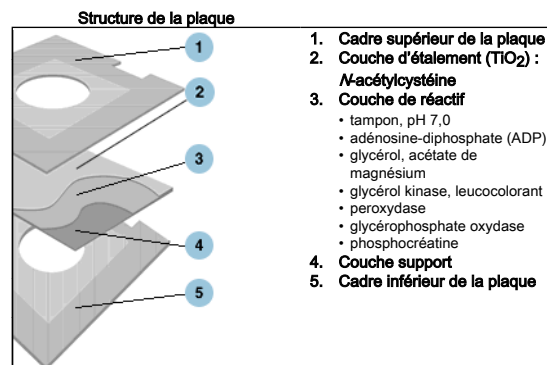
Composition de la plaque

Composants actifs par cm²

L- α -glycérophosphate oxydase (*Aerococcus viridans*, E.C. 1.1.3.21) 0,4 U ; peroxydase (racine de raifort, E.C. 1.11.1.7) 1,4 U ; glycérol kinase (*E.coli*, E.C. 2.7.1.30) 0,5 U ; créatine phosphate 170 μ g ; N-acétylcystéine 54 μ g ; acétate de magnésium 20 μ g ; glycérol 20 μ g ; 2-(3,5-diméthoxy-4-hydroxyphényl)-4,5-bis-(4-diméthylaminophényl) imidazole (leucocolorant) 20 μ g et adénosine diphosphate 20 μ g.

Autres composants

Pigment, liant, tampons, tensioactifs, inhibiteurs, stabilisants, agent de réticulation, solvant de colorant, capteur et chélateur.



Manipulation des réactifs

Attention : ne pas utiliser les cartouches de plaques dont l'emballage est endommagé ou n'est pas hermétiquement fermé.

- Inspecter soigneusement l'emballage pour s'assurer qu'il n'est pas endommagé.
- Si un instrument pointu est utilisé pour ouvrir l'emballage externe, veiller à ne pas endommager l'emballage des cartouches individuelles.

Préparation du réactif

IMPORTANT : la cartouche de plaques doit revenir à température ambiante, entre 18–28 °C, avant d'être sortie de son emballage et chargée dans la réserve de plaques.

1. Retirer les cartouches de plaques de leur lieu de conservation.
2. Laisser la cartouche, dans son emballage, revenir à température ambiante pendant 30 minutes après retrait du réfrigérateur ou 60 minutes après retrait du congélateur.
3. Retirer la cartouche de son emballage et la charger dans la réserve de plaques.

Remarque : charger les cartouches dans les 24 heures qui suivent le moment où elles ont atteint la température ambiante, soit 18–28 °C.

Conservation et stabilité des réactifs

Les plaques CK VITROS sont stables jusqu'à la date de péremption inscrite sur l'emballage, dans les conditions de conservation et de manipulation requises. ne pas utiliser au-delà de la date de péremption.

Réactif	Conditions de conservation		Stabilité
Non ouverts	Réfrigéré	2–8 °C	≤ 4 semaines
	Congelé	≤ -18 °C	Jusqu'à la date de péremption
Ouverts	À bord du système	Système en service (ON)	≤ 1 semaine
	À bord du système	Système hors-service (OFF)	≤ 2 heures

Vérifier les performances à l'aide des matériaux de contrôle de qualité :

- Si le système est arrêté pendant plus de 2 heures.
- Après avoir rechargé des cartouches retirées de la réserve de plaques et mises de côté en vue d'une utilisation ultérieure.

Prélèvement, préparation et conservation des échantillons

Échantillons recommandés

- Sérum
- Plasma³ : Héparine

IMPORTANT :

il a été constaté que certains dispositifs de prélèvement d'échantillons biologiques affectaient d'autres analytes et dosages⁴. En raison de la diversité des dispositifs de prélèvement d'échantillon disponibles, Ortho-Clinical Diagnostics n'est pas en mesure de se prononcer de manière définitive sur la performance de ces produits avec ces dispositifs. S'assurer que les dispositifs de prélèvement utilisés sont compatibles avec ce dosage.

Échantillons non recommandés

Ne pas utiliser d'échantillon fortement hémolysé⁵.

Sérum et plasma

Prélèvement et préparation des échantillons

Prélever les échantillons selon les techniques de laboratoire classiques^{6, 7}.

Remarque :

pour plus de détails sur les volumes de remplissage minimum requis, se reporter au mode d'emploi du système.

Préparation du patient

Le patient ne nécessite aucune préparation particulière.

Précautions particulières

La CK est instable dans le sérum. Centrifuger les échantillons et séparer le sérum ou le plasma du matériel cellulaire dans les 4 heures qui suivent leur prélèvement⁸.

Manipulation et conservation des échantillons

- Manipuler et conserver les échantillons dans des récipients fermés afin d'éviter tout risque de contamination ou d'évaporation.
- Mélanger les échantillons par inversion douce et les laisser revenir à température ambiante, soit 18–28 °C, avant analyse.

Conservation et stabilité des échantillons⁸

Conservation	Température	Stabilité
Température ambiante	18–28 °C	≤ 4 heures
Réfrigéré	2–8 °C	≤ 5 jours
Congelé	≤ -18 °C	≤ 1 mois

Procédure de dosage

Matériel fourni

Plaques CK VITROS Chemistry Products

Matériel nécessaire, mais non fourni

- Jeu d'échantillons de calibrage VITROS Chemistry Products Calibrator Kit 3
- Matériaux de contrôle de qualité tels que les échantillons de contrôle VITROS Chemistry Products Performance Verifier I et II ou VITROS Chemistry Products Isoenzyme Performance Verifier I et II
- Solution VITROS Chemistry Products 7% BSA
- Cartouche de diluant VITROS Chemistry Products FS Diluent Pack 2 (BSA/Solution saline) (pour le mode dilution à bord du système)

Mode opératoire

- Vérifier les réserves de réactifs au moins une fois par jour afin de s'assurer que les quantités disponibles sont suffisantes pour réaliser la charge de travail programmée.
- Pour plus d'informations, se reporter au mode d'emploi du système.

IMPORTANT : ramener tous les liquides et tous les échantillons à la température ambiante, soit 18–28 °C, avant analyse.

Dilution des échantillons

Sérum et plasma

Si l'activité de la créatine kinase dépasse la gamme de mesures (linéarité) du système :

Dilution manuelle d'échantillon

1. Diluer l'échantillon avec la solution VITROS 7% BSA.
2. Procéder à une nouvelle analyse de l'échantillon.
3. Multiplier les résultats par le facteur de dilution pour obtenir une estimation de l'activité de la créatine kinase de l'échantillon avant dilution.

La dilution de l'échantillon se traduit par une activité de la créatine kinase plus importante que prévue¹⁰.

Dilution des échantillons à bord du système (systèmes intégré VITROS, VITROS 5,1 FS et VITROS 250/350 uniquement)

Pour de plus amples informations concernant la procédure de dilution à bord du système, se reporter au mode d'emploi du système. Pour les systèmes intégrés VITROS et VITROS 5,1 FS, utiliser la cartouche de diluant VITROS Chemistry Products FS Diluent Pack 2 pour la dilution.

Calibrage

Étalons requis

Jeu d'échantillons de calibrage VITROS Chemistry Products Calibrator Kit 3

Préparation, manipulation et conservation des étalons

Se reporter au feuillet technique du jeu d'échantillons de calibrage VITROS Calibrator Kit 3.

Procédure d'étalonnage

Se reporter au mode d'emploi du système.

Quand étalonner

Calibrer :

- quand le numéro de lot des plaques change ;
 - après une opération de maintenance, telle que le remplacement d'une pièce importante du système ;
 - lorsque la législation en vigueur dans le pays l'impose.
- Aux États-Unis, par exemple, la réglementation CLIA impose un calibrage ou une vérification du calibrage tous les six mois au minimum.

Le dosage VITROS CK peut aussi exiger un calibrage :

- si les résultats du contrôle de qualité sont régulièrement en dehors des limites acceptables ;
- après certaines interventions techniques.

Pour plus d'informations, se reporter au mode d'emploi du système.

Calculs

Une vitesse de variation de la réflectance est calculée d'après des mesures séquentielles de réflectance de la plaque à 670 nm sur la période d'incubation déterminée. Cette vitesse est utilisée par le modèle de calibrage de dosage enzymatique cinétique en points multiples intégré au logiciel pour calculer l'activité enzymatique. Une fois qu'un calibrage a été effectué sur chaque lot de plaques, l'activité de la créatine kinase dans les échantillons à tester peut être calculée à partir de la vitesse de variation de la réflectance mesurée pour chaque plaque à tester.

Validité d'un calibrage

Les paramètres de calibrage sont automatiquement comparés par le système à un ensemble de paramètres de qualité, qui sont présentés en détail sur l'écran Coefficients et Limites des systèmes VITROS 250/350/950 (pour les systèmes intégrés VITROS et VITROS 5,1 FS, voir l'écran Vérification des données de dosage). La non conformité aux paramètres de qualité prédéfinis entraîne l'échec du calibrage. Le rapport de calibrage doit être utilisé conjointement avec les résultats de contrôle de qualité pour établir la validité du calibrage.

Gamme de mesures (linéarité)

Unités conventionnelles et SI (U/L)	Autres unités (μ kat/L)
20–1600	0,33–26,72

Pour les échantillons hors gamme, se reporter au paragraphe « Dilution des échantillons ».

Traçabilité de l'étalonnage

Les valeurs affectées au jeu d'échantillons de calibrage VITROS Chemistry Products Calibrator Kit 3 pour la créatine kinase sont dérivées d'une modification de la méthode recommandée par le Comité scandinave sur les enzymes pour le dosage de la créatine kinase à 37 °C^{11, 12}.

Contrôle de qualité

Choix du matériau de contrôle de qualité

IMPORTANT : *il est conseillé d'utiliser les échantillons de contrôle VITROS Performance Verifiers sur les systèmes de chimie clinique et systèmes intégrés VITROS. Avant d'utiliser d'autres échantillons de contrôle disponibles sur le marché, évaluer leurs performances pour s'assurer de leur compatibilité avec ce dosage.*

- Les échantillons de contrôle autres que les échantillons VITROS Performance Verifiers peuvent donner des résultats différents de ceux obtenus par d'autres méthodes de dosage de la créatine kinase si :
 - ils ne proviennent pas d'une matrice humaine véritable ;
 - ils contiennent de fortes concentrations de conservateurs, stabilisants ou autres additifs non physiologiques.
- Ne pas utiliser de matériaux de contrôle stabilisés avec de l'éthylène glycol.

Recommandations sur les procédures de contrôle de qualité

- La concentration de l'échantillon de contrôle doit être choisie en fonction de la gamme clinique du test pour lequel il est employé.
- Analyser les matériaux de contrôle de qualité de la même manière que des échantillons de patients, avant ou durant le traitement de ces derniers.
- Pour vérifier les performances du système, doser les échantillons de contrôle :
 - après le calibrage ;
 - conformément à la législation locale en vigueur ou au moins une fois par jour le jour où le dosage est réalisé ;
 - après certaines interventions de maintenance. Se reporter au mode d'emploi du système.
- Si les résultats des contrôles sont en dehors de la gamme acceptable, en rechercher la cause avant de décider de générer les rapports de résultats patients.
- Pour prendre connaissance des recommandations générales en matière de contrôle de qualité, consulter le document *Statistical Quality Control for Quantitative Measurements: Principles and Definitions; Approved Guideline-Third Edition*⁹ ou d'autres directives officielles.
- Pour plus d'informations, se reporter au mode d'emploi du système.

Préparation, manipulation et conservation des matériaux de contrôle de qualité

Se reporter au mode d'emploi des échantillons de contrôle VITROS Chemistry Products Performance Verifier I et II ou VITROS Chemistry Products Isoenzyme Performance Verifier I et II, ou à toute autre documentation produite par le fabricant.

Résultats

Unités employées et de conversion

Le système de chimie clinique et le système intégré VITROS peuvent être programmés pour rapporter les résultats CK en unités conventionnelles, SI ou autres.

Unités conventionnelles et SI	Autres unités
U/L	μkat/L (U/L x 0,0167)

Limites de la méthode

Interférences connues

Une concentration en dioxyde de carbone de 40 mmol/L peut provoquer un biais négatif allant jusqu'à 30% dans le dosage de la créatine kinase.

Autres limites

Certains médicaments et états cliniques peuvent modifier l'activité de la créatine kinase *in vivo*. Pour plus d'informations, se reporter à l'un des résumés publiés^{17, 18}.

Valeurs attendues

Valeurs de référence

Valeurs de référence¹³

	Unités conventionnelles et SI (U/L)	Autres unités (μkat/L)
Femmes	30–135	0,5–2,3
Hommes	55–170	0,9–2,8

La limite supérieure des valeurs de référence varie en fonction de certaines caractéristiques de la population comme le degré d'activité physique¹⁴ ou la race¹⁵. La répartition des valeurs de CK pour des sujets normaux sains présente souvent un biais positif¹⁶ menant à des estimations de limite supérieure de référence variables.

Chaque laboratoire est tenu de vérifier la validité de ces valeurs de référence pour ses propres patients.

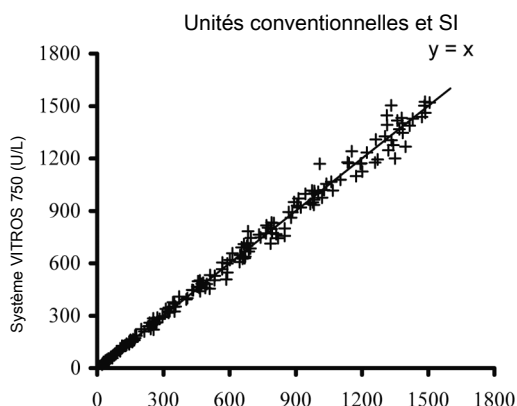
Performances

Comparaison des méthodes


Les courbes et le tableau ci-dessous montrent les résultats de la comparaison entre des échantillons sériques analysés sur le système de chimie clinique VITROS 750 et ceux analysés à l'aide d'une méthode comparative modifiée, issue de la méthode recommandée par le Comité scandinave sur les enzymes^{11, 12}, à 37 °C. Le dosage a été effectué conformément au protocole EP9¹⁹ du NCCLS.

Le tableau présente également les résultats de la comparaison entre échantillons sériques analysés sur les systèmes VITROS 250 et 950 et sur le système VITROS 750, ainsi que de la comparaison entre des échantillons sériques analysés sur le système VITROS 5,1 FS et sur le système VITROS 950.

Le tableau indique aussi les résultats de la comparaison entre les échantillons sériques et plasmatiques analysés sur le système intégré VITROS 5600 et le système de chimie clinique VITROS 5,1 FS. Le dosage a été effectué conformément au protocole EP9²⁰ du NCCLS.



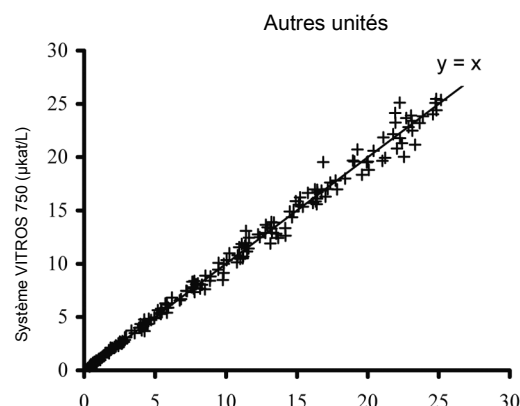Méthode comparative : modification - Comité scandinave sur les enzymes (U/L)



Méthode comparative : modification - Comité scandinave sur les enzymes (µkat/L)

	Coefficient de corrélation			Unités conventionnelles et SI (U/L)			Autres unités (µkat/L)		
				Intervalle d'activité de l'échantillon	Ordonnée à l'origine	Sy.x	Intervalle d'activité de l'échantillon	Ordonnée à l'origine	Sy.x
Système 750 / Méthode comparative	209	1,00	0,997	22–1506	+2,1	37,5	0,4–25,2	+0,03	0,63
Système 250 / Système 750	54	1,01	1,000	24–1321	+0,8	9,8	0,4–22,1	+0,01	0,16
Système 950 / Système 750	100	0,97	1,000	22–1599	+6,7	12,5	0,4–26,7	+0,11	0,21
Système 5,1 FS / Système 950	115	0,97	1,000	25–1575	+1,8	10,1	0,4–26,3	+0,03	0,17
Système 5600 / Système 5,1 FS	107	1,02	0,999	26–1381	-0,4	14,0	0,4–23,2	-0,01	0,22

Précision

La précision a été évaluée à l'aide d'échantillons de contrôle de qualité sur les systèmes VITROS 250, 750, 950 et 5,1 FS conformément au protocole EP5²¹ du NCCLS. La précision a été également évaluée à l'aide de matériaux de contrôle de qualité sur le système intégré VITROS 5600 conformément au protocole EP5²² du NCCLS.

Les données présentées sont représentatives de la performance du dosage et sont données à titre indicatif. Des variables telles que la manipulation et la conservation des échantillons et des réactifs, l'environnement du laboratoire et l'entretien du système peuvent affecter la reproductibilité des résultats.

	Unités conventionnelles et SI (U/L)			Autres unités (μkat/L)			CV %		
	Activité moyenne	ET intra-jour*	ET intra-laboratoire**	Activité moyenne	ET intra-jour*	ET intra-laboratoire**	intra-laboratoire**	Nombre d'observ.	Nombre de jours
250	157	2,3	3,8	2,6	0,04	0,06	2,4	80	20
	1081	16,3	22,9	18,1	0,27	0,38	2,1	80	20
750	85	1,6	2,4	1,4	0,03	0,04	2,8	84	21
	161	2,7	4,6	2,7	0,05	0,08	2,8	84	21
	1165	13,2	25,0	19,5	0,22	0,42	2,1	83	21
950	82	1,7	2,6	1,4	0,03	0,04	3,1	84	21
	155	2,2	3,9	2,6	0,04	0,07	2,5	84	21
	1162	18,1	27,9	19,4	0,30	0,47	2,4	84	21
5,1 FS	145	2,0	5,3	2,4	0,03	0,09	3,7	88	22
	769	12,7	24,9	12,9	0,21	0,42	3,2	88	22
5600	181	3,9	7,6	3,0	0,07	0,13	4,2	88	22
	866	15,5	28,3	14,5	0,26	0,47	3,3	88	22

* La précision de la journée a été déterminée en effectuant deux dosages par jour avec deux à trois doublons.

** La précision du laboratoire est déterminée par la réalisation de tests sur un seul lot de plaques et par un calibrage hebdomadaire.

Spécificité

Substances n'induisant pas d'interférences

Les substances répertoriées dans le tableau ont été testées sur les plaques CK VITROS. Aucune interférence n'a été observée, avec un biais <38 U/L (0,63 μkat/L) aux concentrations indiquées.

Composé	Concentration		Composé	Concentration	
Adénylate kinase	200 U/L	200 U/L	Hémoglobine	150 mg/dL	1,5 g/L
Acide ascorbique	3 mg/dL	170 μmol/L	Intralipide	800 mg/dL	8 g/L
Bilirubine	40 mg/dL	684 μmol/L	Isoniazide	0,5 mg/dL	36 μmol/L
Créatine	15 mg/dL	1 mmol/L	L-dopa	0,6 mmol/L	0,6 mmol/L
Éthanol	300 mg/dL	65 mmol/L	6-mercaptopurine	1,5 mg/dL	99 μmol/L
Acide gentisique	0,5 mg/dL	32 μmol/L	Acide salicylique	35 mg/dL	3 mmol/L
Glutathion	1 mg/dL	33 μmol/L			









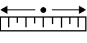
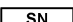






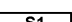


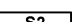

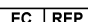
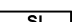





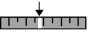



Bibliographie

1. Tietz NW (ed). *Fundamentals of Clinical Chemistry*. ed. 3. Philadelphia: WB Saunders; 373-377; 1987.
2. CLSI. *Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline – Third Edition*. CLSI document M29-A3 (ISBN 1-56238-567-4). CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA; 2005.
3. Doumas BT, et al. Differences Between Values for Plasma and Serum in Tests Performed in the Ektachem 700 XR Analyzer, and Evaluation of "Plasma Separator Tubes (PST)." *Clin. Chem.* 35:1:151-153; 1989.
4. Calam RR. Specimen Processing Separator Gels: An Update. *J Clin Immunoassay*. 11:86-90; 1988.
5. Tietz NW (ed). *Fundamentals of Clinical Chemistry*. ed. 3. Philadelphia: WB Saunders; 376-377; 1987.
6. CLSI. *Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard – Sixth Edition*. NCCLS document H3-A6 (ISBN 1-56238-650-6). CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA; 2007.
7. NCCLS. *Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens; Approved Standard – Fifth Edition*. NCCLS document H4-A5 [ISBN 1-56238-538-0]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2004.
8. *Clinical Laboratory Handbook for Patient Preparation and Specimen Handling*. Fascicle VI: Chemistry/Clinical Microscopy. Northfield, IL: College of American Pathologists; 1992.
9. *Statistical Quality Control for Quantitative Measurements: Principles and Definitions; Approved Guideline – Third Edition*. CLSI document C24-A3 (ISBN 1-56238-613-1). CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA; 2006.
10. Tietz NW (ed). *Textbook of Clinical Chemistry*. ed. 3. Philadelphia: WB Saunders; 662; 1999.
11. Scandinavian Committee on Enzymes: Recommended Method for the Determination of Creatine Kinase in Blood. *Scand. J. Clin. Lab. Invest.* 39:1-5; 1979.

12. Scandinavian Committee on Enzymes: Recommended Method for the Determination of Creatine Kinase in Blood. *Scand. J. Clin. Lab. Invest.* 36:711–723; 1976.
13. Henry JB. *Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods*. Philadelphia: WB Saunders; 2088; 1979.
14. Krahn J. Upper Reference Limit for Creatine Kinase. *Clin. Chem.* 31(1):158; 1985.
15. Black HR, Quallich H-D, and Garlect CB. Racial Difference in Serum Creatine Kinase Levels. *Amer. J. Med.* 81:479–487; 1986.
16. Miller WG, Chinchilli HD, Nance WD. Sampling from a Skewed Population Distribution as Exemplified by Estimation of the Creatine Kinase Upper Reference Limit. *Clin. Chem.* 30(1): 18–23; 1984.
17. Young DS. *Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests*. ed. 4. Washington D.C.: AACC Press; 1995.
18. Friedman RB, Young DS. *Effects of Disease on Clinical Laboratory Tests*. Washington, D.C.: AACC Press; 1990.
19. CLSI. *Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline*. CLSI Document EP9. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA; 1995.
20. NCCLS. *Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline*. NCCLS document EP9-A2 [ISBN 1-56238-472-4]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA; 2002.
21. CLSI. *User Evaluation of Precision Performance with Clinical Chemistry Devices*. CLSI Document EP5. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA; 1992.
22. NCCLS. *Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods; Approved Guideline – Second Edition*. NCCLS document EP5-A2 [ISBN 1-56238-542-9]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA; 2004.

Légende des symboles

Les symboles suivants ont pu être utilisés sur l'étiquette de ce produit.

	Ne pas réutiliser		Conserver à une température égale ou inférieure à		Gamme
	À utiliser avant la date de péremption (année-mois-jour)		Conserver à une température égale ou supérieure à		Intervalle des moyennes
	Numéro de lot		Conserver à une température comprise entre		Moyenne
	Numéro de série		Consultez le feuillet technique		Révisé
	Référence catalogue ou code produit		Attention : Le feuillet technique a été actualisé		Remplace
	Attention: consulter le feuillet technique		À utiliser avec la réserve de plaques 1		Irritant
	Fabricant		À utiliser avec la réserve de plaques 2		Nocif
	Mandataire dans l'Union européenne		Unités SI		Toxique
	Suffisant pour « n » dosages		Unités conventionnelles		Corrosif
	Pour diagnostic <i>in vitro</i>		Valeur		Inflammable
			Der Grüne Punkt (Point Vert). Le fabricant suit certaines règles de mise au rebut pour les déchets des matériaux d'emballage		Estimation ET du laboratoire

CK

Créatine kinase

FEUILLET TECHNIQUE

Récapitulatif des révisions

Récapitulatif des révisions

Date de révision	Version	Description des modifications techniques*
2008-10-28	4.0	<ul style="list-style-type: none"> Ajout d'informations pour le système intégré VITROS 5600 Type de test et conditions d'exécution – Ajout d'énoncé Méthode de comparaison – Ajout d'informations sur les types d'échantillons Bibliographie – Mise à jour Légende des symboles – Mise à jour des données Modifications mineures du texte et du formatage
2004-09-13	3.0	<ul style="list-style-type: none"> Ajout du système de chimie clinique VITROS 5,1 FS Conditions requises concernant les échantillons, Précautions spéciales – Mise à jour rédactionnelle Contrôle de qualité – Mise à jour de la référence Spécificité – Ajout de l'intralipide, mise à jour de la bilirubine Bibliographie – Mise à jour des données Légende des symboles – Mise à jour des données
2002-12-16	2.0	<ul style="list-style-type: none"> Nouvelle organisation et sections conformes à la Directive sur les dispositifs médicaux de diagnostic <i>in vitro</i> (IVD) Dilution des échantillons – Ajouté qu'une dilution peut se traduire par une concentration en CK plus élevée que prévue Méthode comparative – Mise à jour des données de toutes les comparaisons Précision – Mise à jour des données concernant le système 750 Bibliographie – Ajout des références 3, 5, 9 et 11
2002APR19	1.0	Nouveau format, techniquement équivalent à celui de 11/96.

* Les barres verticales dans la marge signalent l'endroit du texte où a été ajouté un amendement technique par rapport à la version précédente du document.

Lors du remplacement de ce feuillet technique, signer et dater ci-dessous, puis archiver conformément à la législation locale en vigueur ou aux directives du laboratoire.

Signature

Document caduc le :



Ortho-Clinical Diagnostics
Johnson & Johnson
50-100 Holmers Farm Way
High Wycombe
Buckinghamshire
HP12 4DP
United Kingdom



Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.
100 Indigo Creek Drive
Rochester, NY 14626-5101

VITROS est une marque déposée d'Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.
© Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 2003–2008.

Ortho Clinical Diagnostics
a *Johnson & Johnson* company